

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Ultraschallzahnbürste!


Wir freuen uns, dass Sie sich für MEGASONEX® entschieden haben.
Genießen Sie in wenigen Schritten die gründlichste und zugleich schonendste Zahnreinigung, die Sie je erlebt haben!

SO FUNKTIONIERT'S

1. MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste vollständig aufladen bis die weiße Kontrollleuchte durchgängig leuchtet.
2. Den Bürstenkopf aufsetzen und durch Drehen der Arretierung fixieren.
3. Beliebige Zahnpasta auf die Borsten auftragen.
Es ist keine spezielle Ultraschallzahnpasta nötig!
4. MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste durch Drücken des Einschaltknopfes einschalten. Mit leichten kreisenden oder rüttelnden Bewegungen von Rot nach Weiß die Zähne putzen.

Bitte beachten Sie: Der Ultraschall bricht die Bakterienketten auf Ihren Zähnen auf. Durch leichte Putzbewegungen entfernen Sie das Gelöste. Bitte verzichten Sie nicht auf Putzbewegungen!

Eine detaillierte Anleitung, z.B. zu den einzelnen Putzmodi, finden Sie im beigelegten Handbuch.

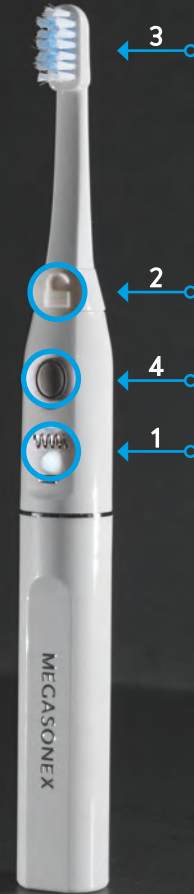

MEGASONEX®

Welche Zahnpasta soll ich verwenden?

Für die Zahnreinigung mit der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste brauchen Sie keine spezielle Zahnpasta. Der Ultraschall benötigt vor allem Feuchtigkeit, den er von jeder Zahncreme bekommt.


Unsere hauseigene MEGASONEX® Zahnpasta empfehlen wir aufgrund der hochwertigen Inhaltsstoffe.

MEGASONEX®

Wie lange hält der Akku?

In der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste haben wir unsere hauseigene Megabattery™ verbaut. Diese hält die Ladung drei bis viermal länger als herkömmliche Nickel Metall Hydrid Batterien.

Eine neue Megabattery™ hält mindestens für 28 Putzzyklen. Bei zweimaliger täglicher Nutzung, hält die Megabattery™ mindestens zwei Wochen.

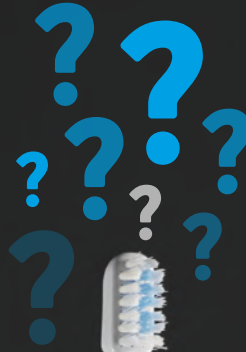

Was muss ich bei der Anwendung der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste beachten?

Bitte putzen Sie mit kleinen, kreisenden oder rüttelnden Bewegungen von Rot nach Weiß Ihre Zähne. Der Ultraschall bricht die Bakterienketten auf, die Sie mit leichten Putzbewegungen im Anschluss entfernen.

Sollten Sie dazu neigen, beim Zähneputzen Druck auszuüben, empfehlen wir Ihnen, die Zahnbürste nur mit zwei Fingern zu halten.

FAQ

Welchen Bürstenkopf sollte ich verwenden?

Wenn Sie empfindliches Zahnfleisch oder andere sensible Stellen im Mund haben, empfehlen wir den Bürstenkopf in der Stärke soft. Anderenfalls medium. Bitte öffnen Sie vor dem Wechseln den Twist-lock Verschluss.

Es ist jeweils ein Bürstenkopf enthalten, damit Sie beide Stärken ausprobieren und die richtige für Sie finden können.